



Dedalus
HEALTHCARE SYSTEMS GROUP



ORBIS Cardiology

Echokardiographie
Workflow-Management

Vollständige Integration in die vorhandene ORBIS Umgebung

Mit ORBIS Echokardiographie wird eines der wichtigsten diagnostischen Verfahren in der Klinik unterstützt. Sämtliche Schritte des Workflows von der Anmeldung über die Untersuchung bis zum fertigen Befund sind enthalten. Durch konsequente Orientierung der Bedienung an bereits bekannten ORBIS-Funktionen ist der Einführungs- und Schulungsaufwand äußerst gering.

AUFTRAGSKOMMUNIKATION ZWISCHEN AMBULANZ, STATION UND ECHOKARDIOGRAPHIELABOR

Order-Entry-Prozess und Workflow

Auf Station wird zum Beispiel die Anmeldung für eine Echokardiographie-Untersuchung elektronisch erstellt. Diese erscheint in den Arbeitslisten im Echo-Labor. Die Untersuchung kann im Laufe der Bearbeitung den Status wechseln. Nach Signierung sind die Untersuchungsergebnisse in der elektronischen Krankengeschichte abrufbar.

TERMIN - UND RESSOURCENPLANUNG

Der gewünschte Termin kann bereits vom Anforderer eingetragen werden und steht direkt in der Leitstelle zur weiteren Untersuchungsplanung zur Verfügung. Durch Verwendung des ORBIS Terminplaners* ist zusätzlich ein optimaler Ressourceneinsatz sichergestellt.

RELEVANTE DATEN DIREKT VERFÜGBAR

- Direkte Übernahme von Geräte-Messdaten
- Effiziente Workflow-Unterstützung
- An den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie orientierte, strukturierte Befunderstellung
- Schneller, sicherer Zugriff auf Vorgeschichte, Laborwerte, Röntgen-befunde und sonstige relevante Informationen aus der Patientenakte

UNTERSUCHUNGS- UND LEISTUNGSDOKUMENTATION

ORBIS Echokardiographie sorgt für einen zügigen Untersuchungsablauf durch komfortable Dokumentation der anfallenden Daten. Hierbei gestattet die Leistungsdokumentation selbstverständlich den Zugriff auf einen bestehenden Hausleistungskatalog.

LEISTUNGSTARKE STRUKTURIERTE BEFUNDUNG

Die Befundmasken orientieren sich an der Terminologie der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK). Dabei ist eine Schnell-Befundung für unkomplizierte Fälle in Form des „1-Klick-Normalbefundes“ ebenso möglich wie die ausführliche Dokumentation komplexer Sachverhalte. Durch die herstellerunabhängige Übernahme der relevanten Messwerte der Echokardiographie-Geräte wird der Arbeitsablauf effizient unterstützt.

Die abschließende ärztliche Beurteilung sowie alle relevanten Untersuchungsdaten werden in einem übersichtlichen Befund zusammengefasst.

Die Texte werden größtenteils automatisch generiert. Der Befund steht sofort nach Freigabe in der ORBIS Krankenakte zur Verfügung.

PACS-AUFRUF

Der IMPAX-Cardio-Viewer kann direkt aus der ORBIS-Befundungsansicht geöffnet werden, die Patientendaten werden hierbei als Parameter übergeben.

INTEGRATION UND KONNEKTIVITÄT

Ultraschallgeräte können unter Nutzung aktueller Standards wie z. B. HL7 und DICOM angeschlossen werden.

Damit ist es möglich, auf dem Gerät Arbeitslisten (DICOM Worklist) zur Verfügung zu stellen.

Messwerte wie z. B. Ventrikelgröße, Klappenwerte, etc. werden nach Abschluss der Untersuchung vom Ultraschallgerät an ORBIS übermittelt und stehen im Befund zur Verfügung (DICOM SR).

Bildsequenzen können an ein Bildarchiv (PACS) zur dauerhaften Speicherung übermittelt werden.

Eine Bildverteilung z. B. zur Betrachtung auf der Station ist ebenfalls verfügbar.

Auf Wunsch ist eine Nachbearbeitung der Bilddaten im PACS mit speziellen kardiologischen Applikationen möglich, z. B. Mitralklappen-Beurteilung mittels 4D-Rekonstruktion.

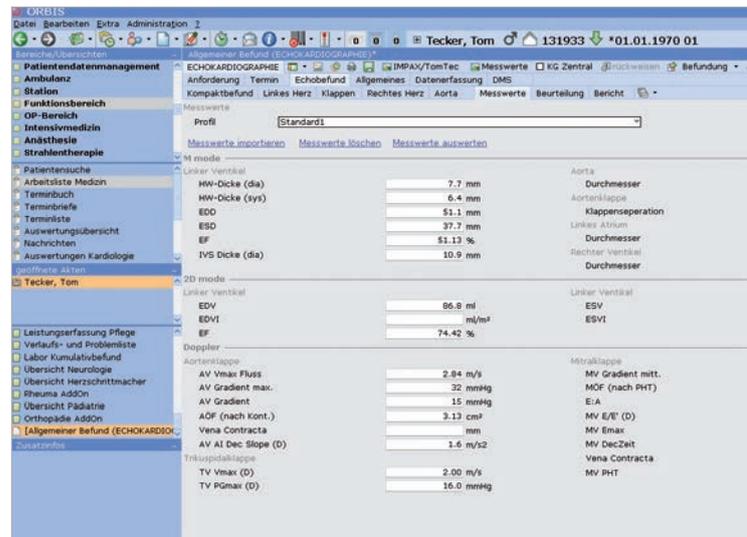


Abb.1 | Messdaten

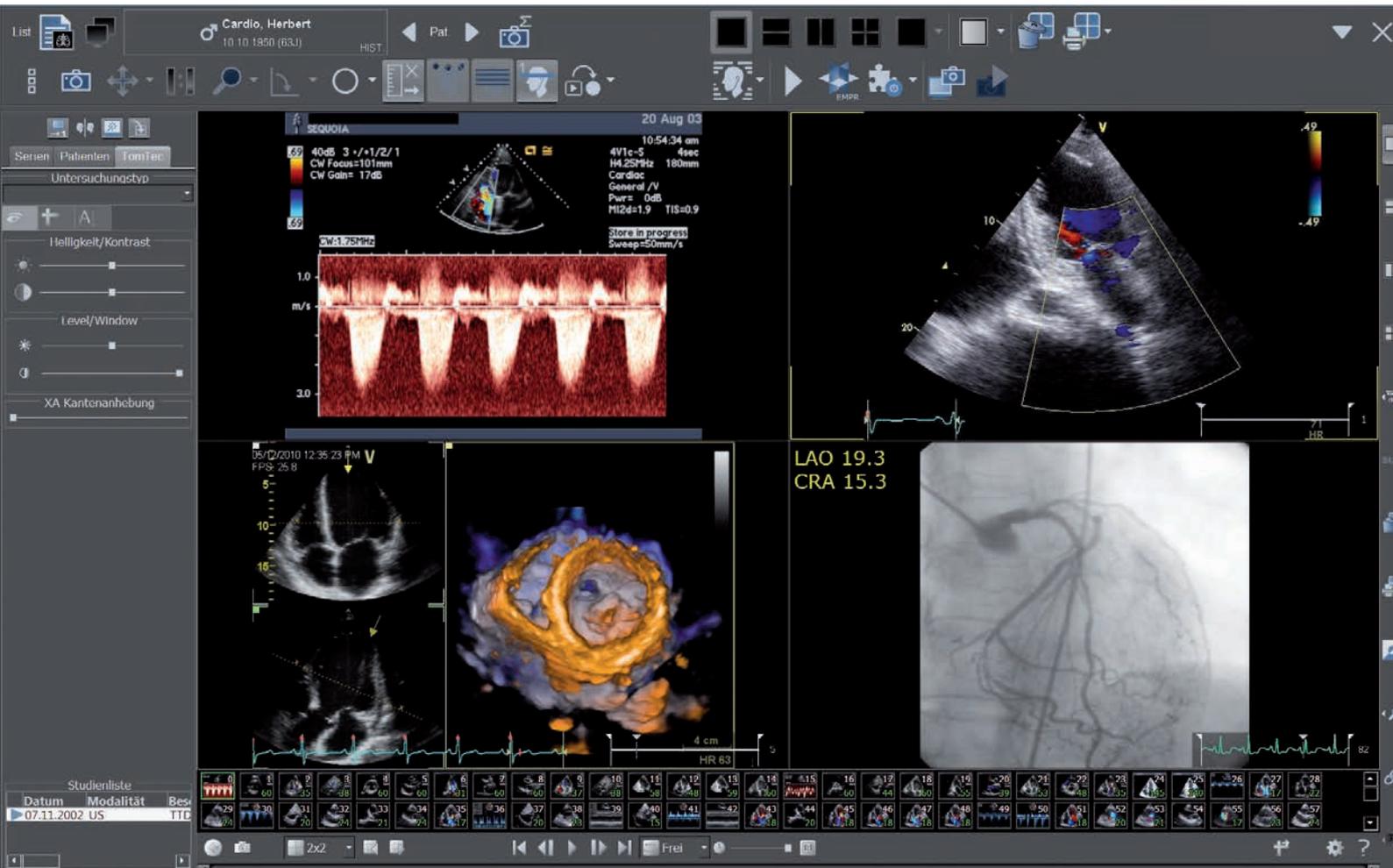


Abb.2 | IMPAX-Cardio-Viewer - Multi Modality View

Dedalus und das Dedalus Logo sind Zeichen der Dedalus S.p.A., Italien, oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle anderen in dieser Publikation erwähnten Namen von Produkten und Diensten sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen oder Markenrechtsinhabern. Die in dieser Publikation angegebenen Informationen dienen lediglich dem Zweck einer Erläuterung und stellen keine von DH Healthcare GmbH zu erfüllenden Normen oder Spezifikationen dar. Die Merkmale der beschriebenen Produkte und Dienste sind unverbindlich und können jederzeit ohne weitere Angabe geändert werden. Die dargestellten Produkte und Dienste sind zudem in bestimmten Regionen möglicherweise nicht verfügbar oder können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Verantwortung übernommen.

Copyright © 2020 DH Healthcare GmbH
Alle Rechte vorbehalten



Dedalus
HEALTHCARE SYSTEMS GROUP

DH Healthcare GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1-3
53227 Bonn

www.dedalusgroup.de