



DU
DeepUnity®

Capture
Mobile
Fotodokumentation

Die neue medizinische Fotodokumentation

Mit DeepUnity Capture haben Sie die medizinische Fotodokumentation mobil im Griff.

DeepUnity Capture ist eine mobile Applikation (App), welche für die medizinische Fotodokumentation genutzt werden kann. Die App kann sowohl auf Android als auch auf iOS basierten Endgeräten angewendet werden und bietet dem Endanwender einen auf den Ablauf der medizinischen Fotodokumentation ideal zugeschnittenen Funktionsumfang.


Von der Auswahl eines Patienten über eine DICOM Worklist oder das Scannen des Patienten-Barcodes hin bis zur manuellen Suche, kann der Patientenkontext komfortabel hergestellt werden.

Die erstellten Fotoaufnahmen werden im PACS gespeichert und sind im Rahmen von Verlaufskontrollen jederzeit einsehbar.

Durch diese unmittelbare Zuordnung der Fotodokumentation zu einem Patienten und der Ablage im DICOM-Format kann ein im höchsten Maße standardisiertes Vorgehen realisiert werden.

Fotoaufnahmen – vom Patienten direkt in Ihr PACS

Die Vorteile auf einen Blick

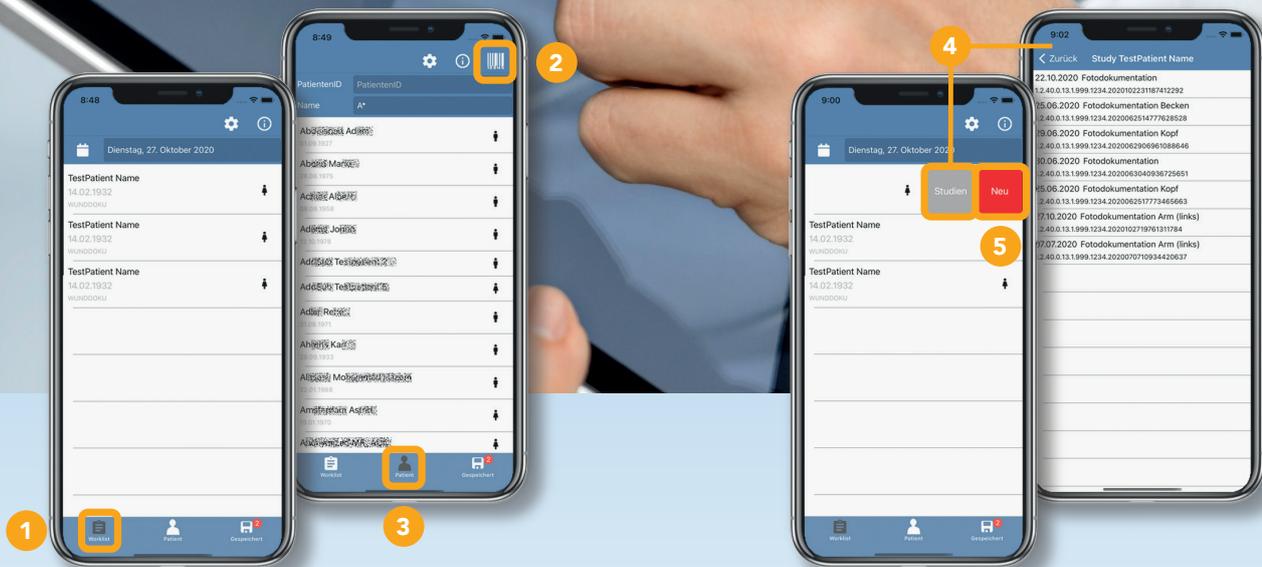

Vor der Aufnahme eines Fotos


Innerhalb der DeepUnity Capture App wird der Patientenkontext wahlweise hergestellt über:

- die Abfrage einer DICOM Modality Worklist 1
- das Scannen des Patientenarmbandes 2
- oder der manuellen Suche des Patienten 3

Aufnahme eines Fotos

Sobald der Patientenkontext vorhanden ist, kann entweder eine neue Fotodokumentation begonnen werden oder vorab die bisherigen Voraufnahmen eines Patienten direkt innerhalb der DeepUnity Capture App eingesehen werden.

- Voraufnahmen 4
- Neue Aufnahme 5

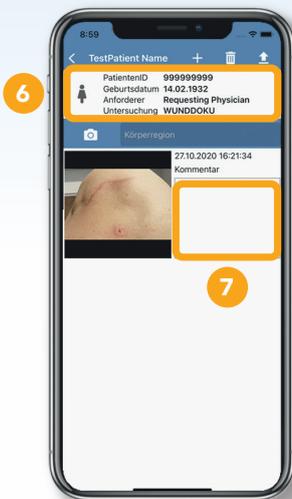

Erstellung einer Fotodokumentation

Innerhalb einer neuen Fotodokumentation sind im Kopfbereich die relevanten Merkmale ersichtlich – wie Patientenmerkmale oder angeforderte Fotodokumentation 6.

- Festlegen der Körperregion
- Anmerkungen zur Fotodokumentation 7

Zugunsten einer flüssigen Lesbarkeit beziehen sich Personalbezeichnungen selbstverständlich immer auf alle Personen (m/w/d).

Dedalus und das Dedalus Logo sind Zeichen der Dedalus S.p.A., Italien, oder ihrer verbundenen Unternehmen. Alle anderen in dieser Publikation erwähnten Namen von Produkten und Diensten sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen oder Markenrechtsinhaber. Die in dieser Publikation angegebenen Informationen dienen lediglich dem Zweck einer Erläuterung und stellen keine von DH Healthcare GmbH zu erfüllenden Normen oder Spezifikationen dar. Die Merkmale der beschriebenen Produkte und Dienste sind unverbindlich und können jederzeit ohne weitere Angabe geändert werden. Die dargestellten Produkte und Dienste sind zudem in bestimmten Regionen möglicherweise nicht verfügbar oder können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Verantwortung übernommen.

Copyright © 2021 Dedalus HealthCare GmbH

Alle Rechte vorbehalten